

orthocaps[®]
The TwinAligner[®] System



Aligners

 MOS

Inhoudstafel

| | |
|---|---------|
| Voordelen | 3 |
| Timeline Orthocaps® | 4 |
| Tips & Tricks Orthocaps® | 5 |
| De verschillende Orthocaps® behandelingen | 6 |
| De complementaire Orthocaps® behandelingen | 7 |
| Aanvullende producten | 8 |
| Stripping | 9 |
| • Selectie boren voor aligners | 9 |
| • Diamanten stripping strips | 10 - 11 |
| • Contacez IPR Strip System | 12 |
| • Sunset Strip | 13 |
| • Mechanisch stripping | 14 |
| Tangen | 15 |
| • Assortiment tangen voor aligners | 15 |
| Afdrukname | 15 |
| • Ortho-Jel Silicone en Cartridge gun | 15 |
| • Ortho-Jel Putty | 15 |
| • Ortho-Jel Adhesive | 15 |
| • Plicafol | 16 |
| • Afdruklepels | 16 - 18 |
| Bonding | 19 |
| Energy Pak™ Elastics | 20 |
| Mondspenders | 21 |
| Chewies | 22 |
| Orthocaps® presentatiedoos | 22 |
| De-Tacher™ Aligner Remover | 22 |


Voordelen aligners:

- Preview behandeling (iSetup)
- Weinig of geen urgenties
- Blijft goed zitten in de mond
- Nauwkeurigheid (herverdeling van de spaties)
- Vermindert ontkalking
- Geen interferentie problemen in occlusie
- Nauwkeurigere IPR (stripping)
- Sneller
- Esthetischer (onzichtbaarheid)
- Comfortabeler
- Minder pijnlijk

Voordelen Orthocaps:

- TwinAligner systeem voor een betere controle van de bewegingen en een meer precieze beheersing van de gebruikte krachten:
 - « Zachte » aligners overdag
 - Stuggere aligners 's nachts
- Zachte krachten (bewegingen van 0,5 mm)
- Hoog kwalitatief thermoplastisch materiaal bestaande uit 2 componenten:
 - Iets hardere buitenlaag ter bescherming tegen schade
 - Zachte binnenlaag om zacht aan de tanden te hechten en om een maximaal comfort en precieze tandbewegingen te garanderen
- Polyvalente materialen:
 - DLP (Dual Layer Polymer) - 2 lagen
 - SLP (Single Layer Polymer) - 1 laag
- Haalbaarheidsverzoek
- Advies (behandeling, materialen, ...)
- Veelzijdigheid aan behandelingen
- Herbeoordeling van de behandeling na de 1e fase
- Vermijd verspilling en de onnodige productie van aligners
- Expertise (team van orthodontisten, tandartsen, ...)
- Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
- Hoge reactiviteit (→ **Het + punt van MOS**)

Orthocaps, de flow van het TwinAligner systeem

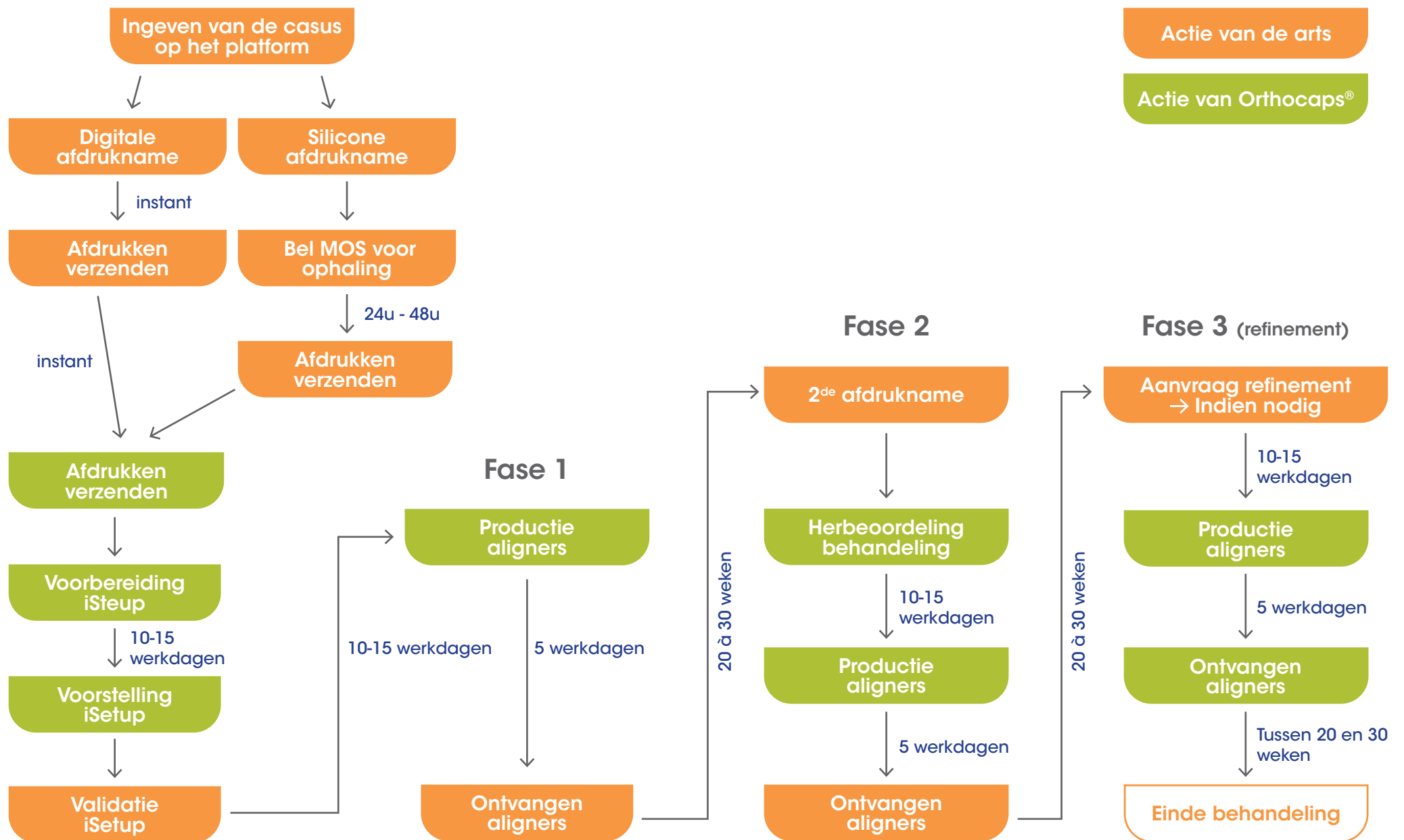

Tips & Tricks

Haalbaarheidsverzoek

Indien u aarzelt om een casus op te starten, doe dan een haalbaarheidsverzoek op het platform:

- Stuur gewoon röntgenfoto's en foto's van uw patiënt door.
- Stuur geen afdrukken door (kosten zouden u kunnen aangerekend worden indien u de casus uiteindelijk niet opstart).

Afdrukken

- Niet-digitale afdrukken moeten in silicone worden gemaakt.
- Ophaling van uw silicone afdrukken:
 - Bel MOS voor 14u30 voor een ophaling op de volgende werkdag.
- Afhankelijk van het merk van uw digitale camera, kunt u een directe link maken met Orthocaps.
- Als uw camera dit niet toelaat, moet u uw .stl-bestanden uploaden op het portaal.

Portaal

- Controleer uw portaal regelmatig.
- Zorg ervoor dat u een e-mailadres opgeeft dat vaak wordt geraadpleegd, zodat u zo snel mogelijk op de hoogte kunt worden gehouden van de kennisgevingen van Orthocaps.
- Zorg er altijd voor dat u het strippingprotocol volgt om het succes van de behandeling te garanderen.
- Aarzel indien nodig niet om advies te vragen via het berichtensysteem van uw portaal.
- Bel ons gerust op voor al uw bijkomende vragen. Wij nemen dan vanop afstand de controle over op uw portaal.

Aligners

- De aligners moeten de hele dag (dayCaps) en de hele nacht (nightCaps) worden gedragen.
- De aligners kunnen worden uitgenomen om te eten en om ze te reinigen.
- Om een goede stabiliteit in elke fase te verzekeren, wordt aanbevolen elke set drie weken te dragen.
- Geef uw patiënt slechts één set aligners bij de eerste afspraak. Plan de volgende afspraak iets voor drie weken om de tweede set te geven. Zo krijgt u een goede eerste indruk van de motivatie van uw patiënt en hoe goed hij of zij de instructies opvolgt.
- Pin u niet vast op de duur van de behandeling, deze hangt ook af van de patiënt.

De verschillende behandelingen:

| | |
|---------------------------------|---|
| Orthocaps® PRO | Dit is het complete, meest polyvalente behandelstelsel dat 90% van de malocclusies kan behandelen. |
| Orthocaps® KIDS | Dit is het specifieke stelsel voor een gemengd gebit. De aligners worden alleen 's nachts gedragen (12 uur). Dit stelsel is het meest geschikt voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. |
| Orthocaps® NOCTIS | Het is het perfecte stelsel voor wie zijn beroepsactiviteit niet kan combineren met een orthodontische behandeling. De aligners worden alleen 's nachts (12 uur) gedragen en in het weekend overdag indien mogelijk: anterieure esthetische malposities (crowding, malpositie, diastema). |
| Orthocaps® TEN | In totaal 10 aligners sets voor de behandeling van milde malocclusies: bijvoorbeeld 5 aligners sets voor de onderboog, 5 voor de bovenboog, of slechts één boog met 10 aligners sets. |
| Orthocaps® TEN & TEN | Een totaal van 20 aligners sets voor de behandeling van niet-ernstige malocclusies: 10 sets voor de bovenboog, 10 voor de onderboog, bijvoorbeeld. |

Woordenschat

1 behandeling = 2 fasen + refinement (enkel voor Orthocaps Pro, Kids en Noctis)

1 fase = 8, 10 of 12 stappen

1 stap = 1 set

1 set = 2 aligners (dag en nacht)

De verschillende complementaire behandelingen :

| | |
|--|---|
| BiteMaintainer | <p>De BiteMaintainer is een tandheelkundige positionner in silicone. Hij kan worden gebruikt als retainer en als afwerkingsapparaat voor een perfecte occlusie. Na localisatie van de scharnier-as, wordt de afdruk voor de BiteMaintainer gemaakt met behulp van CAD software. Deze methode bespaart de practicus tijd en maakt een nauwkeurigere reconstructie mogelijk dan de traditionele methode. Voor casussen die eerder met het Orthocaps® systeem zijn behandeld, hebben we alleen een laterale cefalometrische röntgenfoto en een gecentreerde afdruk van de occlusie nodig.</p> |
| Rainmaker | <p>De Rainmaker maakt het gemakkelijk om een behandeling met aligners te combineren met een klasse II corrector (Bielle-systeem). Kleine draaispillen zijn geïntegreerd in de nacht aligner. De telescopische armen worden losgeschroefd en kunnen worden gemonteerd op de volgende aligner. Het apparaat is zeer comfortabel voor de patiënt omdat hij het kan uitnemen wanneer hij wil. Het kan de hele nacht worden gedragen en een paar uur overdag, afhankelijk van de mogelijkheden.</p> |
| HAT (Hybrid Aligner Therapie) | <p>Dit systeem gebruikt tegelijkertijd zowel aligners als vaste apparatuur. De HAT hybride behandeling is de ideale oplossing wanneer een behandeling met aligners alleen niet voldoende is. De belangrijkste fase van de HAT-behandeling is het gelijktijdige gebruik van hulpmiddelen en aligners. Deze hulpmiddelen zijn meestal partiële linguale hulpmiddelen, die indirect aan het linguale oppervlak van de tanden worden bevestigd. Deze modules bestaan uit linguale brackets en draden waarop de aligners precies geplaatst kunnen worden. De beweging van de tanden wordt gecontroleerd door de interactie van de aligners met de vaste modules.</p> |
| Clear Retainer | <p>Om het resultaat van de behandeling te stabiliseren, kunnen patiënten, na voltooiing van de behandeling met aligners, op lange termijn retentie aligners dragen. De Clear Retainer is op verzoek verkrijgbaar en wordt verkocht in kits van drie identieke aligners. Patiënten kunnen ze dag en nacht dragen gedurende enkele maanden of zelfs jaren.</p> |
| Lingualretainer | <p>De lingualretainer is een retentiedraad die met indirecte bonding wordt geplaatst en die gewoonlijk van hoektand tot hoektand reikt. Het is een gouden draad aangepast op een model en vervolgens op een transfer aligner. De vaste retentie wordt voor onbepaalde duur gedragen en moet regelmatig door de practicus worden gecontroleerd.</p> |

Aanvullende producten

Stripping

Selectie boren voor aligners






• Diamant en polishers

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 8859 014 3 (FG) | 8833 031 3 (FG) | 8392 016 3 (FG) | 3801 023 3 (FG) |
| « Naald » kop | « Chinese hoed » kop | « Spitse » kop | « Bal » kop |
| <ul style="list-style-type: none"> • Korrel : 60µ (fijn) • Verkrijgbaar in 010, 012, 016 en 018 | <ul style="list-style-type: none"> • Korrel : 60µ (fijn) | <ul style="list-style-type: none"> • Korrel : 60µ (fijn) • Verkrijgbaar in 010, 012, 016 en 018 | <ul style="list-style-type: none"> • Korrel : 110µ (dik) • Verkrijgbaar in 008, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 025, 029, 033 |
|  | |  | |
| 5160 2 (CA) | | 5209 2 (CA) | |
| Gladmaken en Voorpolijsten | | Polijsten | |
| Fase 1 Medium korrel | | Fase 2 Fijne korrel « Hoogglans » effect Uitstekende afwerking van alle oppervlakken Geschikt voor kleine mondopeningen | |
| • 3.000 tot 8.000 tpm | | | |



De **dispenser** biedt plaats aan zes frezen (turbine en/of contra-angle). Hoogkwalitatief roestvrij staal, volledig compatibel met uw gebruikelijke ontsmettings-, desinfectie- en sterilisatie-oplossingen.

• Carbide (FG)

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| CT48LS 012 3 (FG) | CT379 S 023 3 (FG) | CT390 S 018 3 (FG) | C22GK 016 3 (FG) | C282 K 014 3 (FG) | C334 014 3 (FG) |
| | | | « Ronde » kop | Conische afschuining « Torpedo » kop | « Medium spitse » kop |
| Debonding Afwerking | Debonding Afwerking | Debonding Afwerking | Debonding | Debonding | Uitsnijding dieptrekplaat |
| Transversale groeven om de afwerking te optimaliseren Optimale verwijdering van lijmresten | | | Atraumatisch dankzij een kraag (vermijdt het krassen van het glazuur en het verwonden van het tandvlees) | | Niet-scherpe spits |
| <ul style="list-style-type: none"> • 12 messen • Max. snelheid 300.000 tpm | | | <ul style="list-style-type: none"> • Max. snelheid 300.000 tpm | <ul style="list-style-type: none"> • 8 tot 10 messen • Max. snelheid 300.000 tpm • Verkrijgbaar op CA in 014 • Max. snelheid 100.000 tpm | <ul style="list-style-type: none"> • 8 messen • Max. snelheid 300.000 tpm |

Diamanten stripping strips



• Geperforeerd


| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| DSXP | 8DSXP | 4DSXP |
| Medium Enkelzijdige diamant Gekarteld | Fijn Enkelzijdige diamant Gekarteld | Extra-fijn Enkelzijdige diamant Gekarteld |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 3,75 mm • Dikte : 0,13 mm • Verkocht per doos van 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 3,75 mm • Dikte : 0,10 mm • Verkocht per doos van 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Lengte: 147 mm • Breedte : 3,75 mm • Dikte : 0,08 mm • Verkocht per doos van 10 |

• Ongeperforeerd

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| DS | 8DS | 4DS |
| Medium Enkelzijdige diamant | Fijn Enkelzijdige diamant | Extra-fijn Enkelzijdige diamant |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 2,5 mm • Dikte : 0,13 mm • Verkocht per doos van 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 2,5 mm • Dikte : 0,10 mm • Verkocht per doos van 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 2,5 mm • Dikte : 0,08 mm • Verkocht per doos van 10 |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| DSL | 8DSL | 4DSL |
| Medium Enkelzijdige diamant | Fijn Enkelzijdige diamant | Extra-fijn Enkelzijdige diamant |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 3,75 mm • Dikte : 0,13 mm • Verkocht per doos van 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 3,75 mm • Dikte : 0,10 mm • Verkocht per doos van 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 3,75 mm • Dikte : 0,08 mm • Verkocht per doos van 10 |

| | |
|--|---|
|  |  |
| 8DSX | 4DSX |
| Fijn Enkelzijdige diamant Gekarteld | Extra-fijn Enkelzijdige diamant Gekarteld |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lengte: 147 mm • Breedte : 3,75 mm • Dikte : 0,10 mm • Verkocht per doos van 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 3,75 mm • Dikte : 0,08 mm • Verkocht per doos van 10 |

| |
|--|
|  |
| DSLH |
| Medium Dubbelzijdige diamant |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lengte : 147 mm • Breedte : 6 mm • Dikte : 0,13 mm • Verkocht per doos van 10 |

Contacez IPR Strip System

- Ergonomisch ontworpen voor bediening met één hand
- Optimale grip om spiervermoeidheid te verminderen
- Vermindert niet overmatig het glazuur
- Vermijdt scherpe hoeken
- Efficiënt op voorste tanden, gemakkelijke toegang tot posterior zones
- Zal niet snijden in lippen of tandvlees.
- Steriliseerbaar op 134°C



| IPR STRIPS | Unité de Vente | Référence |
|---|----------------|-----------|
| Kit (32 IPR Strips) | 32 | ECM0894 |
| Volledige kit (32 IPR Strips + 8 optionele Strips) | 40 | ECM0880 |
| Assortiment (« Yellow » + « Red » + « Dark Blue » + « Green ») | 16 | ECM0893 |
| IPR Starter « Yellow » / 0.07mm Enkelzijdige gekartelde diamant / Extra fijne korrel | 8 | ECM0883 |
| IPR Opener « Red » / 0.12mm Dubbelzijdige diamant / Medium korrel | 8 | ECM0884 |
| IPR Widener « Dark Blue » / 0.15mm Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel | 8 | ECM0885 |
| IPR Extra-Widener « Green » / 0.20mm Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel | 8 | ECM0886 |
| IPR STRIPS OPTIONNELS | Unité de Vente | Référence |
| Assortiment (« Clear » + « Cyan » + « Purple » + « Brown ») | 16 | ECM0882 |
| IPR Opener « Clear » / 0.10mm Enkelzijdige gekartelde diamant / Medium fijne korrel | 8 | ECM0887 |
| IIPR Widener « Cyan » / 0.15mm Enkelzijdige diamant / Medium korrel | 8 | ECM0888 |
| IPR Super-Widener « Purple » / 0.25mm Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel | 8 | ECM0889 |
| IPR Mega-Widener « Brown » / 0.30mm Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel | 8 | ECM0891 |
| IPR Mega-Widener « Mint » / 0.35mm Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel | 8 | ECM0899 |
| IPR Mega-Widener « Aqua » / 0.40mm Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel | 8 | ECM0896 |
| IPR Mega-Widener « Turquoise » / 0.45mm Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel | 8 | ECM0901 |
| IPR Mega-Widener « Teal » / 0.50mm Dubbelzijdige diamant / Dikke korrel | 8 | ECM0898 |
| Striphouder voor opslag en sterilisatie Tot 8 strips | 1 | ECM0895 |

Sunset strip

• Enkelzijdige Sunset strip

- Multifunctionele enkelzijdige strips
- Uitstekend voor het contouren en afwerken van composietrestauraties
- Bijzonder geschikt voor het strippen van één enkele tand

| Referentie | Korrel | Dikte |
|------------|-----------|-------|
| SU-SS-01 | Super fin | 0.08 |
| SU-SS-02 | Fin | 0.10 |
| SU-SS-03 | Medium | 0.13 |
| SU-SS-04 | Epcis | 0.18 |



• Double-Sided Sunset strip

- Multifunctionele dubbelzijdige strips
- Uitstekend voor het contouren en afwerken van composietrestauraties
- Bijzonder geschikt voor interproximale reducties

| Referentie | Korrel | Dikte |
|------------|-----------|-------|
| SU-DS-01 | Super fin | 0.11 |
| SU-DS-02 | Fin | 0.15 |
| SU-DS-03 | Medium | 0.21 |
| SU-DS-04 | Epcis | 0.30 |



Mechanische stripping

- **Intensiv Swingle Professional Kit** (ref : WG-69 LT Ortho PROF)

- Gekalibreerde en efficiënte stripping

| Omschrijving | Verkoopseenheid | Referentie |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Hoekstuk (met licht) * | 1 | WG-69 LT |
| Ejector | 1 | 053 |
| Sproeier reinigingsnaald | 1 | 054 |
| Intensiv Ortho-Strips Opener | 1 | OS08OP-DS |
| Intensiv Ortho-Strips ExtraCoarse | 1 | OS80XC-DS |
| Intensiv Ortho-Strips Coarse | 1 | OS60C-DS |
| Intensiv Ortho-Strips Medium | 1 | OS40M-DS |
| Intensiv Ortho-Strips Fine | 1 | OS25F-DS |
| Intensiv Ortho-Strips Polishing | 1 | OS15POL-DS |



*Verkrijgbaar zonder licht (ref : WG-69 A)

- **Intensiv IPR Set** (réf : IPR 6000/WG-69 LT)






| Omschrijving | Verkoopseenheid | Referentie |
|--|-----------------|------------|
| Mechanische stripping | | |
| Hoekstuk (met licht) * | 1 | WG-69 LT |
| Ejector | 1 | 053 |
| Intensiv Ortho-Strips Opener | 1 | OS08OP-DS |
| Intensiv Ortho-Strips ExtraCoarse | 1 | OS80XC-DS |
| Intensiv Ortho-Strips Coarse | 1 | OS60C-DS |
| Intensiv Ortho-Strips Medium | 1 | OS40M-DS |
| Intensiv Ortho-Strips Fine | 1 | OS25F-DS |
| Intensiv Ortho-Strips Polishing | 1 | OS15POL-DS |
| Stripping gauge | | |
| IPR-DistanceControl (0.10 mm) | 1 | IPR-DC010 |
| IPR-DistanceControl (0.15 mm) | 1 | IPR-DC015 |
| IPR-DistanceControl (0.20 mm) | 1 | IPR-DC020 |
| IPR-DistanceControl (0.40 mm) | 1 | IPR-DC040 |
| IPR-DistanceControl (0.50 mm) | 1 | IPR-DC050 |
| Handmatige stripping | | |
| Intensiv ApproxOpener 8µm, ultrafijn, getand en met diamant bekleed aan één kant | 1 | AO2018OS |
| Intensiv ApproxOpener 8µm, ultrafijn, getand en diamantgeslepen aan beide zijden | 1 | AO2018DS |
| Intensiv ProxoContour Coarse, geperforeerd 2 korrelgroottes : 80µm coarse en 40µm fijn | 2 | PXCC8040 |
| Intensiv ProxoPolish 2 korrelgroottes : 15µm extrafijn en 8µm ultrafijn | 2 | PXPO1508 |

*Verkrijgbaar zonder licht (ref : WG-69 A)



Tangen

Assortiment tangen voor aligners

| Round cutting punch | Drop punch | Vertical punch | Horizontal punch | Point elevation plier |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Afdrukname

Ortho-Jel Silicone en Cartridge gun

Vinylsilicone-afdrukmetaal met lage viscositeit die door additie polymeriseert. Verkrijgbaar in zelfmengende cartridges.

| Omschrijving | Verkoopseenheid | Référence |
|----------------|-----------------|-----------|
| Cartridge 50ml | 2 | EC.J0260 |
| Cartridge gun | 1 | EC.J0263 |



Ortho-Jel Putty

Ortho-Jel® Putty wordt gebruikt in combinatie met Ortho-Jel® Silicone. Ortho-Jel® Putty is zacht maar niet kleverig. De toevoeging van uithardende vinylsilicone maakt het tot een kneedbaar, precisie-afdrukmetaal. Ortho-Jel® Putty is gemakkelijk te mengen en heeft uitstekende eigenschappen.

| Omschrijving | Verkoopseenheid | Referentie |
|--------------|-----------------|------------|
| Pot van 400g | 2 | EC.J0261 |



Ortho-Jel Adhesive

Enkele lagen Adhesive worden aanbevolen om een goede hechting van het afdrukmetaal met de afdruklepel te verzekeren en om vervorming tijdens de afdrukname te voorkomen.

| Omschrijving | Verkoopseenheid | Referentie |
|--------------|-----------------|------------|
| Flesje 10ml | 1 | EC.J0264 |



Plicafol

Scheidingsbladen voor afdruklepels. Plicafol is een zeer rekbare film. Het is perfect geschikt voor het maken van individuele afdrukken en maakt het gemakkelijk om de 2 siliconen (Ortho-Jel Silicone & Ortho-Jel Putty) te gebruiken voor een nauwkeurig en snel resultaat.



| Omschrijving | Verkoopseenheid | Referentie |
|-------------------|-----------------|------------|
| Set van 20 vellen | 1 | ECJ0265 |

Afdruklepels

• Wegwerp afdruklepels

- Gemaakt van stug materiaal met hoge dichtheid om doorbuigen van de verticale wanden te voorkomen
- Afgeronde, comfortabele en anatomisch gevormde randen met anterior retentiesleuven en verticale perforaties voor een perfecte retentie van het afdruk materiaal
- 100% recycleerbaar
- Speciaal ontworpen voor de orthodontie : met hoge verticale wanden voor een betere afdruk.



Maxillary

| Maat | Kleur | Verkoopseenheid | Referentie |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| Zeer klein 1 | Blauw | 50 | ECJ1231 |
| Zeer klein 2 | Blauw | 50 | ECJ1232 |
| Klein | Blauw | 10 | J01233 |
| Medium | Groen | 10 | J01234 |
| Groot | Geel | 10 | J01235 |

Mandibular

| Maat | Kleur | Verkoopseenheid | Referentie |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| Zeer klein 1 | Blauw | 50 | ECJ1241 |
| Zeer klein 2 | Blauw | 50 | ECJ1242 |
| Klein | Blauw | 10 | J01243 |
| Medium | Groen | 10 | J01244 |
| Groot | Geel | 10 | J01245 |






Assortiment

| Verkoopseenheid | Referentie |
|--------------------|------------|
| 15 max. & 15 mand. | K00455 |

• Aluminium afdruklepels

- Aanpasbaar
- Kleurcodering voor betere visualisatie
- Gladde rand voor optimaal comfort

Maxillary

| Maat | Kleur | Verkoopseenheid | Referentie | |
|-----------------|-------|-----------------|------------|---|
| 1 (57mm x 48mm) | Roos | 1 | J00304 |  |
| 2 (62mm x 45mm) | Blauw | 1 | J00305 |  |
| 3 (68mm x 60mm) | Rood | 1 | J00306 |  |
| 4 (75mm x 65mm) | Goud | 1 | J00307 |  |
| 5 (84mm x 70mm) | Paars | 1 | J00308 |  |

Mandibular

| Maat | Kleur | Verkoopseenheid | Referentie | |
|-----------------|-------|-----------------|------------|---|
| 1 (62mm x 44mm) | Roos | 1 | J00364 |  |
| 2 (70mm x 48mm) | Blauw | 1 | J00365 |  |
| 3 (75mm x 50mm) | Rood | 1 | J00366 |  |
| 4 (82mm x 53mm) | Goud | 1 | J00367 |  |
| 5 (88mm x 55mm) | Paars | 1 | J00368 |  |

Assortiment

| Verkoopseenheid | Referentie |
|------------------|------------|
| 5 max. & 5 mand. | K00566 |

- Metalen afdruklepels



Maxillary

| Maat | Verkoopseenheid | Referentie |
|------------|-----------------|------------|
| Zeer klein | 1 | ECM1251 |
| Klein | 1 | ECM1252 |
| Medium | 1 | ECM1253 |
| Groot | 1 | ECM1254 |

Mandibular

| Maat | Verkoopseenheid | Referentie |
|------------|-----------------|------------|
| Zeer klein | 1 | ECM1255 |
| Klein | 1 | ECM1256 |
| Medium | 1 | ECM1257 |
| Groot | 1 | ECM1258 |

Assortiment

| Verkoopseenheid | Referentie |
|------------------|------------|
| 4 max. & 4 mand. | ECM1250 |



Bonding

TruLock Light Activated Adhesive

Gebruiksklare fluorhoudende monopasta composiet op basis van hars. Het bespaart u tijd in de stoel door onnodige mengtijd en voorkomt verspilling doordat u de exacte hoeveelheid kan gebruiken die u nodig hebt.



- Gebruik: voor metalen/keramische en kunststof/composiet beugels.
- Houdbaarheid: 30 maanden na de op het product aangegeven productiedatum.
- Hardheid: Fotopolymerisatie met lamp bij minimaal 600mw/cm² en 400 - 500 nanometers

| Omschrijving | Verkoopseenheid | Rerentie |
|--|-----------------|----------|
| Light Activated Adhesive (Spuut van 5g) | 4 | J04000 |
| Light Activated Adhesive (Capsule van 0.35g) | 40 | J04001 |
| Light Activated primer 7ml | 1 | J04002 |
| Light Activated Kit (4 spuiten van 5 g, 2 x 3 ml primer, 7 ml etching vloeistof, borstels, spatulas, mixing pads) | 1 | K00070 |
| Light Activated Kit (40 Capsules van 0,35g, 7ml primer, 2 Spuiten van 4g etching gel, tips, borstels, mixing pads) | 1 | K00071 |
| Light Activated Mini Kit (1 spuit van 5 g, 3 ml primer, 3 ml etching vloeistof, borstels, spatulas, mixing pads) | 1 | K00072 |
| Light Activated Mini Kit (1 spuit van 5g, 3ml primer, borstels, spatulas, mixing pads) [ZONDER ETCHANT] | 1 | K00073 |
| Light Activated Kit (4 x 5g Spuiten, 2 x 3ml primer, borstels, spatulas, mixing pads) [ZONDER ETCHANT] | 1 | K00074 |

TruLock Flowable Adhesive

Vloeibare, radiopake, fluoride bevattende composiet op basis van hars. Verkrijgbaar in de kleur A2. Kan worden gebruikt voor vele toepassingen, waaronder indirect bonding.

| Omschrijving | Verkoopseenheid | Referentie |
|------------------------|-----------------|------------|
| 1 spuit van 2g, 5 tips | 2 | J04004 |



Energy Pak Elastics

ENERGYPAK™

- Assortiment elastiekjes
- 3 types beschikbaar:
 - Algemeen gebruik
 - Van hoektand tot hoektand
 - Extra-oraal
- Hypoallergeen materiaal
- Zakje voor eenvoudige verdeling
- Hygiënische en hermetische verpakking



1/8"

3/16"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"



0.32cm

0.48cm

0.64cm






























0.79cm

0.95cm

1.27cm

Force

Usage Général


| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|--|--|---|---|---|
| Light | 57gm (2oz.) |  parachute J-01100 |  hang glider J-01101 |  balloon J-01102 |  dirigible J-01103 |  helicopter J-01104 | |
| Medium | 85gm (3oz.) | |  motor home J-01111 |  truck J-01112 |  train J-01113 |  monorail J-01114 | |
| Heavy | 99gm (3.5oz.) |  surfboard J-01120 |  canoe J-01121 |  sailboat J-01122 |  speedboat J-01123 |  submarine J-01124 | |
| Heavy Plus | 128gm (4.5oz.) | |  motorcycle J-01131 |  racecar J-01132 |  car J-01133 |  snowmobile J-01134 | |
| Extra Heavy | 142gm (5oz.) |  jumprope J-01140 |  skateboard J-01141 |  unicycle J-01142 |  bicycle J-01143 |  jogging J-01144 | |
| Extraoral Light | 454gm (16oz.) | | | | |  spaceship J-01174 | |
| Heavy | 908gm (32oz.) | |  rickshaw J-01181 |  horse J-01182 |  chariot J-01183 |  covered wagon J-01184 |  stage coach J-01185 |

- J01100-J01144: 100 elastiekjes/zakje; 50 zakjes/doos
- J01174-J01185: 50 elastiekjes/zakje; 20 zakjes/doos

- De elastiek bereikt zijn beoogde sterkte wanneer hij wordt uitgerokken tot 3 maal de begindiameter.
- 2 elastiekjes zijn nodig om de beoogde kracht te bereiken.

Mondspenders

Unilaterale Mondspender

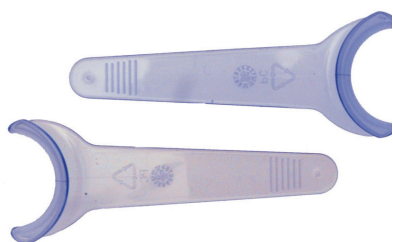

- Met extra lang handvat voor een goede grip bij de patiënt
- Transparant en niet-reflecterend (blauwachtig). Comfortabel voor de patiënt
- Steriliseerbaar in de autoclaaf

| OMSCHRIJVING | Eenheid | Ref. |
|----------------|---------|---------|
| Kleine maat | 2 | ECM0107 |
| Standaard maat | 2 | ECM0108 |

Mondspenders



- Polypropylene monoblok
- Mondspenders verkrijgbaar in 2 maten, maar ook met handgrepen en zuiggeleiders indien nodig
- Steriliseerbaar in de autoclaaf (4 min @134°C)
- Handgrepen om de wang vrij te maken, voor gemakkelijke toegang tot de achterste tanden.

| OMSCHRIJVING | Eenheid | Ref. |
|------------------------|---------|--------|
| Mondspenders SOFT | 1 | J00405 |
| Mondspenders HARD | 1 | J00406 |
| Mondspenders MINI SOFT | 1 | J00407 |

Mondspenders



- Gemaakt van autoclaveerbaar polycarbonaat
- Gemakkelijk te plaatsen
- Volledig zicht op het front en de kiezen
- Geen reflectie van de flitser
- Ideaal voor fotografie, vullingen, tandsteen verwijdering, bracket plaatsing, ...
- Steriliseerbaar in de autoclaaf bij 121°C

| OMSCHRIJVING | Eenheid | Ref. |
|----------------|---------|---------|
| Kleine maat | 2 | ECM1331 |
| Standaard maat | 2 | ECM1330 |

Mondspenders



- Met verlengstukken voor de handen van de patiënt
- Zeer praktisch, omdat het mogelijk is om, indien nodig, de laterale sectoren handmatig te verbreden
- Verkrijgbaar in 3 maten en 4 kleuren
- Koud steriliseerbaar of op 121°C

| OMSCHRIJVING | Eenheid | Ref. |
|---|---------|---------|
| Klein formaat (6,5 cm tussen de mondstukken) (rood, groen, blauw, geel en wit) | 1 | ECM1333 |
| Medium formaat (9 cm tussen de mondstukken) (rood, groen, blauw, geel en wit) | 1 | ECM1334 |
| Groot formaat (10 cm tussen de mondstukken) (rood, groen, blauw, geel en wit) | 1 | ECM1335 |
| Medium formaat soepel (koud of warm steriliseerbaar) | 1 | ECM1337 |

Chewies

Ontworpen om de aligners beter te doen aansluiten op het gebit van de patiënt. De patiënt bijt gedurende een korte periode op de chewie tijdens het insteken van de aligners.



Presentatiedoos

Met deze presentatiedoos kunt u de Orthocaps aligners laten zien aan patiënten die geïnteresseerd zijn in een onzichtbare behandeling.


De presentatiedoos bevat:

- Een typodont met voorgevormde attachments
- Een dag aligner
- Een nacht aligner



Aligner Remover

Dit hulpmiddel is ontworpen om thuis door patiënten te worden gebruikt en maakt het gemakkelijker om de bovenste en onderste aligners te verwijderen. Het hulpmiddel heeft een ergonomisch ontwerp en biedt de nodige hefboomwerking om de aligners gemakkelijker te verwijderen.

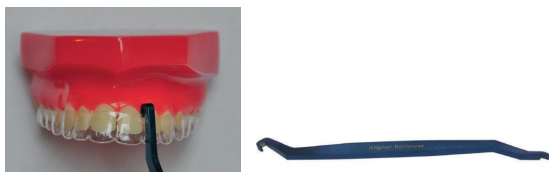

De De-Tacher™ is gemaakt van titanium-gecoat staal, waardoor hij geschikt is voor gebruik door patiënten met nikkelallergieën. Hij kan in de vaatwasmachine worden gereinigd



Gemaakt van plastic



mos.be

Victor Allardstraat, 75 - 1180 Brussel
+32 (0)2 376 22 22 | contact@mos.be